

Tabella zu Lichtintensitäten - bitte beachten Sie das Kapitel 3.3 in der Gebrauchsanweisung!






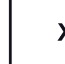










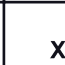
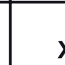


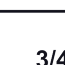
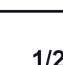
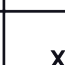
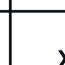





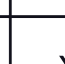







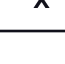
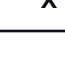
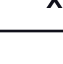
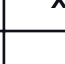
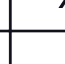
Table of light intensities - please note chapter 3.3 in the instruction manual!

Tableau des intensités lumineuses : veuillez prendre en compte le chapitre 3.3 du mode d'emploi!

Tabella delle intensità di luce - rispettarle in conformità al Capitolo 3.3 di queste istruzioni per l'uso!

Tabla de intensidades de luz. ¡Observe el capítulo 3.3 del manual de instrucciones!

Tabel betreffende lichtintensiteiten- neem hoofdstuk 3.3 in de gebruiksaanwijzing in acht!

Haarfarbe / Hair colour / Couleur des cheveux / Colore dei capelli / Color del cabello / Haarkleur	Hautfarbe / Skin tone / Couleur de peau / Colore della pelle / Color de la piel / Huidskleur					
	I	II	III	IV	V	VI
Schwarz/Black/ Noir/ Nero/ Negro/Zwart						
Dunkelbraun/ Dark brown/ Marron foncé/ Marrone cupo/ Marrón oscuro/ Donker bruin						
Braun/Brown/ Marron/ Marrone/ Marrón/Bruin						
Dunkelblond/ Dark blonde/ Blond foncé/ Biondo cupo/ Rubio moreno/ Donker blond						
Blond/ Blonde/ Biondo/ Rubio						
Rot/Red/ Rouge/Rosso/ Rojo/Red						
Grau&weiß/ Grey&white/ Gris&blanc/ Grigio&bianco/ Gris&blanco/ Grijs&wit						

Wählen Sie die Lichtintensitätsstufe vor allem gemäß Ihrem Wohlbefinden!

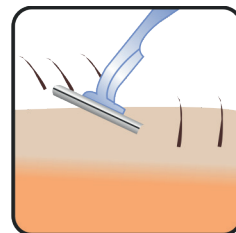
Choose the light intensity level primarily according to your own comfort!

L'intensité doit avant tout être réglée en fonction de votre confort personnel!

I livelli di potenza devono essere selezionati principalmente in base al comfort personale!

¡En principio, debe seleccionar el nivel de intensidad con el que se sienta más cómodo!

Selecteer de lichtintensiteit voornamelijk aan de hand van uw persoonlijke comfortervaringen!



DE Es sollten mindestens 4 Wochen zwischen Hautbräunung und Benutzung des Gerätes liegen.

GB Leave at least 4 weeks between skin browning and use of the device.

FR Il est recommandé de laisser s'écouler 4 semaines entre une séance de bronzage et l'utilisation de l'appareil.

IT Devono passare almeno 4 settimane tra l'abbronzatura della pelle e l'utilizzo del dispositivo.

ES Entre el bronceado de la piel y el uso del aparato deberían transcurrir al menos 4 semanas.

NL Er moeten minstens 4 weken tijd liggen tussen een bruinings-procédé van de huid en het gebruik van het toestel.

DE Die zu behandelnde Stelle muss haarlos, vollkommen trocken und frei von öligen bzw. cremigen Substanzen, Puder, Makeup oder Deodorant usw. sein.

GB The areas to be treated must be hairless, completely dry and free from oily or creamy substances, powder, make-up, deodorant etc.

FR La zone à traiter doit être dépourvue de poils, complètement sèche et exempte de substances huileuses ou crémeuses, poudre, maquillage ou déodorant, etc.

IT Il punto da trattare deve essere privo di peli, completamente asciutto e senza sostanze oleose o cremose, talco, trucco o deodoranti, ecc.

ES La zona que va a ser tratada debe estar limpia de vello, completamente seca y sin sustancias oleosas o cremosas, polvos, maquillaje, desodorante, etc.

NL De te behandelen plaats moet haarloos, volledig droog en vrij zijn van olieachtige substanties, make-up of deodorant.

DE Stecken Sie das Gerätesteckerende des Netzteilkabels in das Gerät und das Netzteil in eine Steckdose.

GB Plug the device plug end of the power supply cable into the device and the power supply into a socket.

FR Branchez l'extrémité mâle du câble d'alimentation dans l'appareil et le bloc d'alimentation à une prise de courant.

IT Inserire lo spinotto del dispositivo del cavo di alimentazione nel dispositivo e l'alimentatore in una presa.

ES Introduzca el conector del cable de alimentación en el aparato y el adaptador de corriente en una toma de corriente.

NL Steek het einde van de toestelstekker van van het adaptersnoer in het toestel en de adapter in een contactdoos.



DE Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste und stellen Sie die getestete und für Ihre Haut geeignete Intensität ein.

GB Press the ON/OFF button and set the intensity which has been tested and is suitable for your skin.

FR Pressez la touche MARCHÉ / ARRÊT et réglez l'intensité testée et appropriée pour votre peau.

IT Premere il tasto ON/OFF e regolare l'intensità testata e adatta per la propria pelle.

ES Pulse el botón de encendido/apagado y ajuste la intensidad probada y adecuada para su piel.

NL Druk op de EIN-/AUS-knop en stel de geteste en voor uw huid geschikte intensiteit in.

DE Die Hautkontaktfläche muss komplett auf der Haut aufliegen (Bereitschaftsanzeige blinkt grün). Drücken Sie die Auslösetaste, um einen Lichtimpuls auszulösen.

GB The skin contact area must lie fully on the skin (readiness indicator flashes green). Press the trigger button to trigger a light pulse.

FR La surface suiveuse de peau doit se trouver complètement sur la peau (l'indicateur de charge clignote en vert). Pressez la touche d'activation pour déclencher une impulsion lumineuse.

IT La superficie di contatto con la pelle deve trovarsi completamente sulla pelle (la spia di standby lampeggia verde). Premere il tasto di rilascio per rilasciare un impulso di luce.

ES La superficie de contacto con la piel debe apoyarse completamente sobre la piel (el indicador de disponibilidad parpadea en verde). Pulse el botón disparador para disparar un impulso de luz.

NL Het oppervlak dat contact maakt met de huid moet volledig op de huid liggen (het groene lampje knippert). Druk op de knop die het toestel in werking stelt, om een lichtimpuls af te geven.

DE Fahren Sie mit der Anwendung an der nächsten Hautstelle fort. Nach Gebrauch Gerät ausschalten!

GB Continue the application on the next skin area. Switch device off after use!

FR Renouvelez l'application sur la zone de peau suivante. Mettre l'appareil hors service après utilisation.

IT Proseguire con il trattamento sul successivo punto della pelle. Spegner il dispositivo dopo l'utilizzo!

ES Continúe la aplicación en la siguiente zona de la piel. Desconectar el aparato tras su uso.

NL Ga verder met de behandeling op de volgende huidplek. Na gebruik het toestel uitschakelen!



MEDISANA®

DE **Haarentfernungssystem Silhouette IPL 800**

GB **Hair Removal System Silhouette IPL 800**

FR **Système d'épilation Silhouette IPL 800**

IT **Sistema di epilazione Silhouette IPL 800**

ES **Sistema de depilación Silhouette IPL 800**

NL **Ontharingssysteem Silhouette IPL 800**



Kurzanleitung Vor Benutzung die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen!

Quick reference manual Before use read the instruction manual thoroughly!

Manuel rapide Veuillez lisez le mode d'emploi en entier avant d'utiliser l'appareil!

Breve guida Leggere completamente le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo!

Guía rápida Antes de utilizar, se debe leer completamente el manual de instrucciones.

Korte handleiding Voor gebruik de gebruiksaanwijzing volledig doorlezen!